

Бесплатно

Открытый код · MIT

Без посредников

Спросите свой браслет. Словами.

Пошаговая инструкция: подключаем браслет Fitbit (или Pixel Watch) к **Claude** и **ChatGPT**. Сон, пульс, шаги, SpO2 — прямо в чате, плюс дневник еды, воды и веса голосом.

Сон

7 ч 48 мин

Пульс покоя

58 уд/мин

SpO2

96 %

Шаги

13 825

● Claude · коннектор fitbit подключён

Как я спал на этой неделе?

В среднем **7 ч 48 мин**, лучше всего — в четверг.
Глубокий сон 50–70 мин за ночь, REM около 2 часов.

Запиши обед 700 ккал и стакан воды

✓ Записал: обед 700 ккал и 250 мл воды

4 шага

без программирования

40 мин

от нуля до работы

0 ₽

бесплатные тарифы

15

инструментов в чате



код и инструкция на GitHub

ЧТО ПОЛУЧИТСЯ

Ваш ИИ-ассистент видит данные браслета

Личный сервер-коннектор связывает облако Google Health, куда синхронизируется браслет, с Claude и ChatGPT. Дальше просто пишете в любом чате — на телефоне, в браузере, на компьютере:

«Как я спал на этой неделе? Сравни с прошлой»

«Сколько шагов и калорий сегодня?»

«Какой пульс покоя за месяц, есть ли тренд?»

«Запиши обед: борщ и котлета, 700 ккал»

«Запиши стакан воды и вес 82,5»

«Были ли уведомления об аритмии?»

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

**Почему это безопасно**

Сервер — ваш личный, сервисов-посредников нет. Доступ к данным даётся через обычное окно входа Google: чтение плюс запись ваших ручных логов (еда, вода, вес). Изменить или удалить данные браслета коннектор не может — это запрещено на уровне API Google. Код открыт (MIT).

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

**Браслет или часы**

Fitbit (Air, Charge, Inspire, Sense, Versa...) или Pixel Watch, привязанные к Google-аккаунту

**GitHub и Cloudflare**

бесплатные аккаунты, банковская карта не нужна

**Google-аккаунт**

тот же, что в приложении Fitbit на телефоне

**ИИ-ассистент**

Claude (платный план) или ChatGPT Plus / Pro

ПЛАН НА 40 МИНУТ

**Сервер**

5 мин

**Google Cloud**

15 мин

**Ключи**

3 мин

**Подключение**

5 мин

1



ШАГ 1

Сервер на Cloudflare

≈ 5 минут

Одна кнопка делает всё сама: копирует код в ваш GitHub, создаёт хранилище токенов и запускает сервер. Проверено: 17 секунд от клика до рабочего адреса.

- 1 Откройте репозиторий проекта — QR-код на обложке или `github.com/deslabpro-max/fitbit-google-health-mcp`
- 2 Нажмите в описании кнопку **Deploy to Cloudflare** (1)
- 3 Войдите в Cloudflare или зарегистрируйтесь, разрешите доступ к GitHub
- 4 Ничего не меняйте и нажмите **Create and deploy** (2)
- 5 Дождитесь зелёной сборки и скопируйте адрес сервера (3)

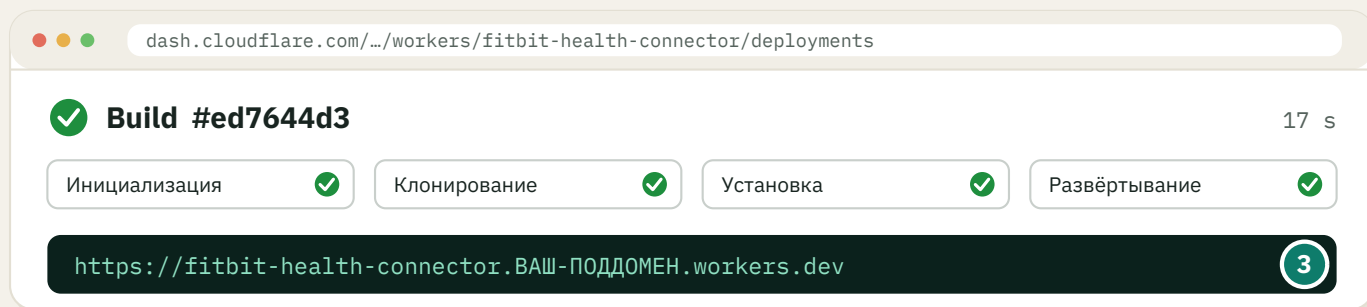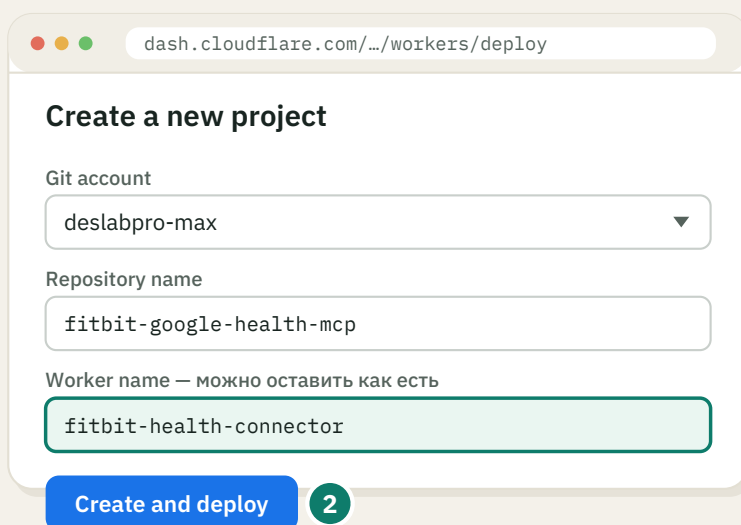

Проверьте, что сервер жив

Откройте этот адрес в браузере — должна появиться страница «Коннектор Fitbit Air → Claude». Сохраните адрес: он понадобится в шагах 2 и 4. Если на экране настройки задали своё имя воркера — в адресе и в примерах дальше будет оно.

2

ШАГ 2


Доступ к данным браслета

≈ 15 минут

Создаём ваше **личное** приложение в Google Cloud — только оно и только с вашего согласия сможет читать данные здоровья. Всё делается на `console.cloud.google.com` под аккаунтом, к которому привязан браслет.


2.1 Проект и Google Health API

- 1 Выбор проекта (слева сверху) → **New project** → любое имя → Create
- 2 В поиске наберите **Google Health API** → **Enable**

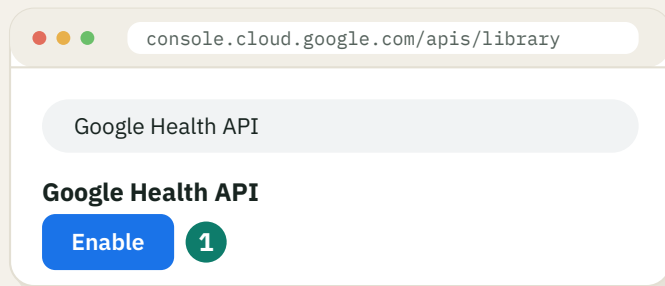



2.2 Экран согласия и Test users

- 1 **OAuth consent screen**: имя приложения, ваш e-mail, **External**, режим **Testing**
- 2 **Audience** → **Test users** → **Add users** → добавьте свой адрес Google

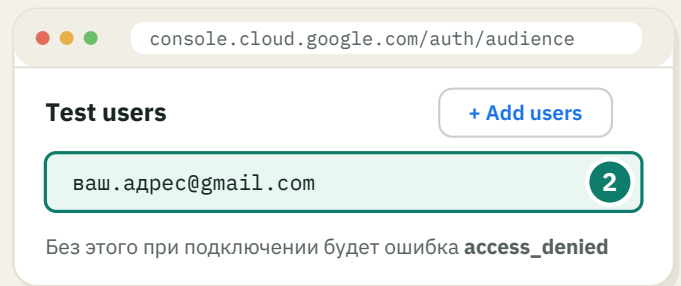

2.3 OAuth-клиент для вашего сервера

- 1 Раздел **Clients** → **Create client**
- 2 Тип: **Web application** — не Desktop!
- 3 Имя — любое
- 4 **Authorized redirect URIs** → Add URI → адрес сервера из шага 1 + /callback
- 5 **Create** — появятся Client ID и секрет

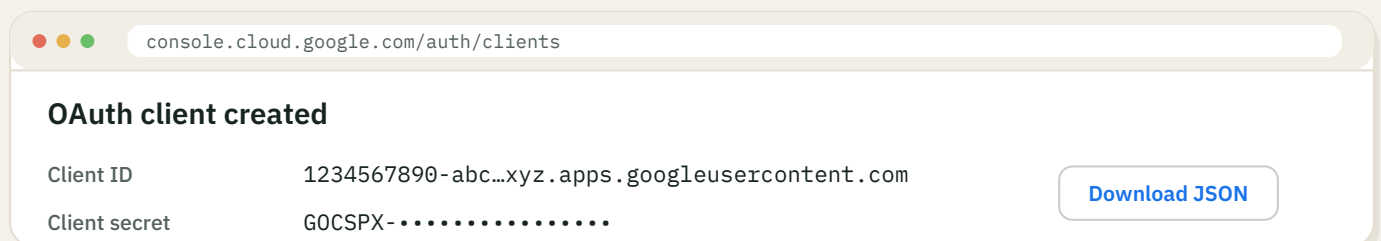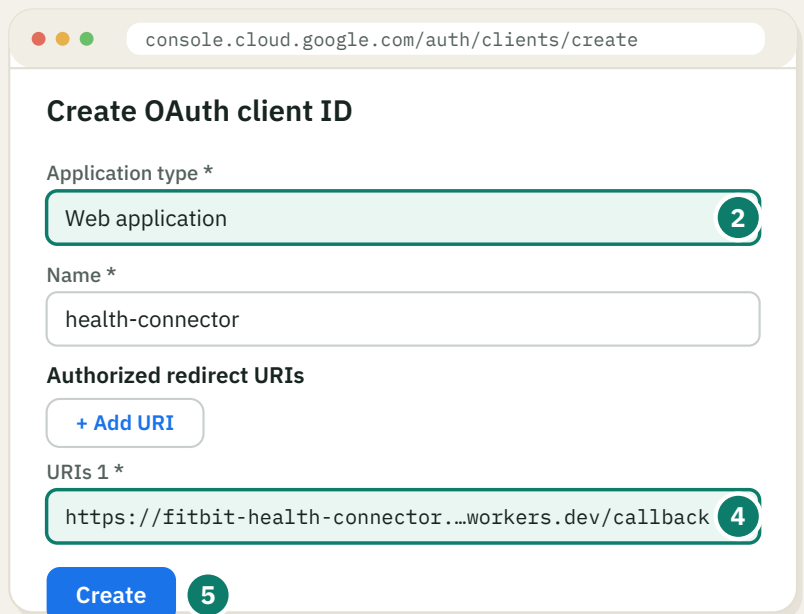**Секрет показывают только один раз**

Сразу скопируйте Client ID и Client secret в заметки или нажмите Download JSON. Потерялся — в клиенте можно добавить новый секрет.


3

ШАГ 3

Два ключа — серверу

≈ 3 минуты

- 1 Cloudflare → **Workers & Pages** → ваш воркер → **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add**
- 2 Type **Secret**, имя `GOOGLE_CLIENT_ID`, значение — Client ID → Save
- 3 Ещё раз: `GOOGLE_CLIENT_SECRET` и секрет `GOCSPX-...` → Save

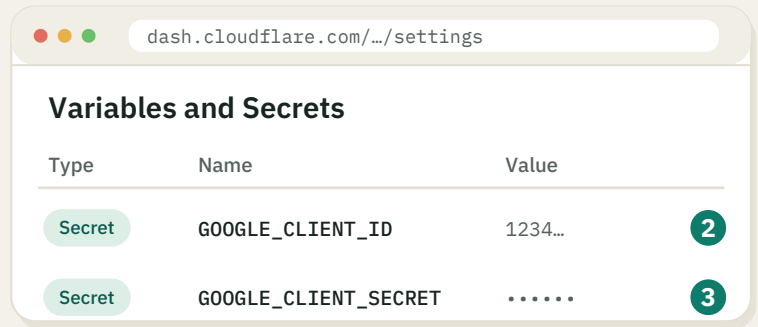

4


ШАГ 4

Подключаем к ИИ

≈ 5 минут


Claude — браузер, телефон, десктоп

- 1 claude.ai → **Settings** → **Connectors**
- 2 **Add custom connector** → URL сервера + `/mcp` → Add
- 3 **Connect** → окно Google → аккаунт с браслетом → разрешить

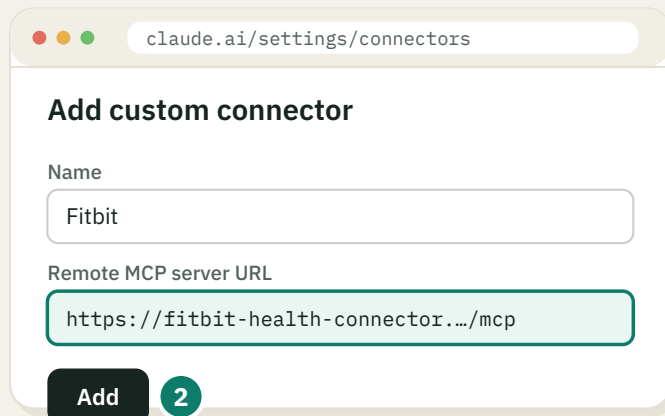

ChatGPT — планы Plus / Pro

- 1 Settings → **Apps & Connectors** → Advanced → включить **Developer mode**
- 2 **Create** → имя Fitbit, URL сервера + `/mcp`, авторизация **OAuth**
- 3 Окно Google → разрешить. В чате — меню «+»

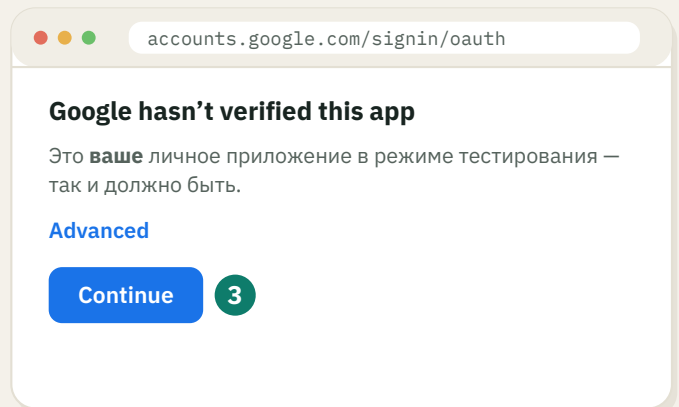

Готово! Проверьте в любом чате

«Покажи статус браслета» — модель, заряд, время синхронизации. «Сводка за сегодня» — шаги, сон с фазами, пульс, SpO2. «Запиши стакан воды» — проверка записи. Если данных за сегодня нет, откройте приложение Fitbit на телефоне: данные уходят в облако при синхронизации.

ВОЗМОЖНОСТИ

15 инструментов в одном коннекторе

Сон с фазами

Глубокий, REM, лёгкий; засыпание, пробуждения, тренды по неделям

Пuls, HRV, SpO2

Пuls покоя и по часам, вариабельность, кислород, дыхание и температура кожи во сне

Активность

Шаги, дистанция, калории, этажи, зонные минуты, тренировки

Дневник еды и воды

Калории и БЖУ голосом — в Fitbit рядом с расходом энергии

Аритмия

Уведомления о возможной фибрилляции предсердий (AFib)

Статус браслета

Заряд и время последней синхронизации — встроенная диагностика

Данные браслета коннектор только читает. Записывать и удалять можно лишь собственные записи: вес, еду, воду, тренировки, настраивание, симптомы.

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

access_denied в окне Google

Аккаунт не добавлен в Test users (шаг 2.2). Добавьте и подключитесь заново.

redirect_uri_mismatch

Адрес в клиенте Google не совпадает с адресом сервера + /callback. Свёрните до буквы, без слэша на конце.

«Google hasn't verified this app»

Норма: приложение ваше личное. Нажимайте Continue.

Ошибка 403 SERVICE_DISABLED

Не включён Google Health API (шаг 2.1).

Просит переподключиться раз в неделю

В режиме Testing Google ограничивает токен ~7 днями. Лечится: OAuth consent screen → Publish app.

Пuls есть, а шаги пустые

Сводки нового устройства Google считает с задержкой до нескольких часов — коннектор покажет диагностику.

Нет данных вообще

Браслет не синхронизирован: откройте приложение Fitbit. «Статус браслета» покажет время синхронизации.

В ChatGPT нет кнопки Create

Не включён Developer mode или план Free.



ГДЕ КУПИТЬ

Fitbit Air, чёрный — на Ozon

Подойдёт и любой Fitbit или Pixel Watch.

[Открыть на Ozon](#)**Код, обновления и помощь**

Всё открыто на GitHub: код, подробная инструкция, раздел Issues для вопросов. Новые версии подтягиваются кнопкой Sync fork в вашей копии — Cloudflare пересоберёт сам.

