

Бесплатно

Открытый код · MIT

Без посредников

# Спросите свой браслет. Словами.

Пошаговая инструкция: подключаем браслет Fitbit (или Pixel Watch) к **Claude** и **ChatGPT**. Сон, пульс, шаги, SpO2 — прямо в чате, плюс дневник еды, воды и веса голосом.

Сон

**7 ч 48 мин**

Пульс покоя

**58 уд/мин**

SpO2

**96 %**

Шаги

**13 825**

● Claude · коннектор fitbit подключён

Как я спал на этой неделе?

В среднем **7 ч 48 мин**, лучше всего — в четверг.  
Глубокий сон 50–70 мин за ночь, REM около 2 часов.

Запиши обед 700 ккал и стакан воды

✓ Записал: обед 700 ккал и 250 мл воды

**4 шага**

без программирования

**40 мин**

от нуля до работы

**0 ₽**

бесплатные тарифы

**15**

инструментов в чате



код и инструкция на GitHub

## ЧТО ПОЛУЧИТСЯ

# Ваш ИИ-ассистент видит данные браслета

Личный сервер-коннектор связывает облако Google Health, куда синхронизируется браслет, с Claude и ChatGPT. Дальше просто пишете в любом чате — на телефоне, в браузере, на компьютере:

«Как я спал на этой неделе? Сравни с прошлой»

«Сколько шагов и калорий сегодня?»

«Какой пульс покоя за месяц, есть ли тренд?»

«Запиши обед: борщ и котлета, 700 ккал»

«Запиши стакан воды и вес 82,5»

«Были ли уведомления об аритмии?»

## КАК ЭТО РАБОТАЕТ

**Почему это безопасно**

Сервер — ваш личный, сервисов-посредников нет. Доступ к данным даётся через обычное окно входа Google: чтение плюс запись ваших ручных логов (еда, вода, вес). Изменить или удалить данные браслета коннектор не может — это запрещено на уровне API Google. Код открыт (MIT).

## ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

**Браслет или часы**

Fitbit (Air, Charge, Inspire, Sense, Versa...) или Pixel Watch, привязанные к Google-аккаунту

**GitHub и Cloudflare**

бесплатные аккаунты, банковская карта не нужна

**Google-аккаунт**

тот же, что в приложении Fitbit на телефоне

**ИИ-ассистент**

Claude (платный план) или ChatGPT Plus / Pro

## ПЛАН НА 40 МИНУТ

**Сервер**

5 мин

**Google Cloud**

15 мин

**Ключи**

3 мин

**Подключение**

5 мин

1



ШАГ 1

# Сервер на Cloudflare

≈ 5 минут

Одна кнопка делает всё сама: копирует код в ваш GitHub, создаёт хранилище токенов и запускает сервер. Проверено: 17 секунд от клика до рабочего адреса.

- 1 Откройте репозиторий проекта — QR-код на обложке или `github.com/deslabpro-max/fitbit-google-health-mcp`
- 2 Нажмите в описании кнопку **Deploy to Cloudflare** (1)
- 3 Войдите в Cloudflare или зарегистрируйтесь, разрешите доступ к GitHub
- 4 Ничего не меняйте и нажмите **Create and deploy** (2)
- 5 Дождитесь зелёной сборки и скопируйте адрес сервера (3)

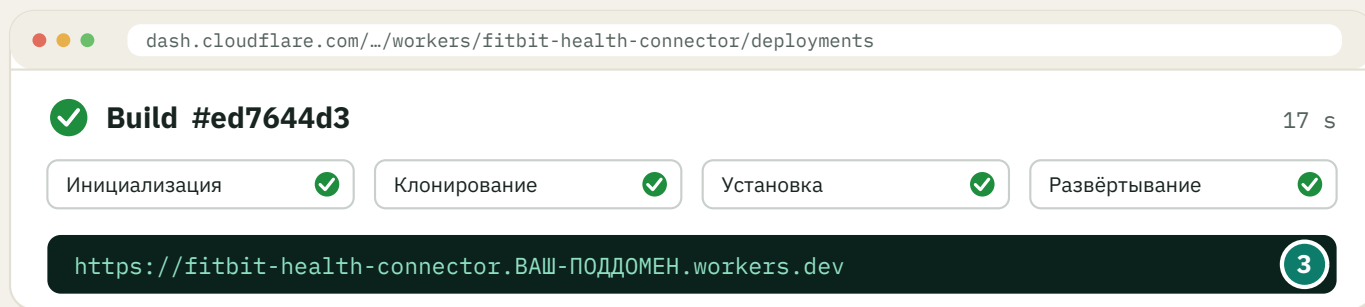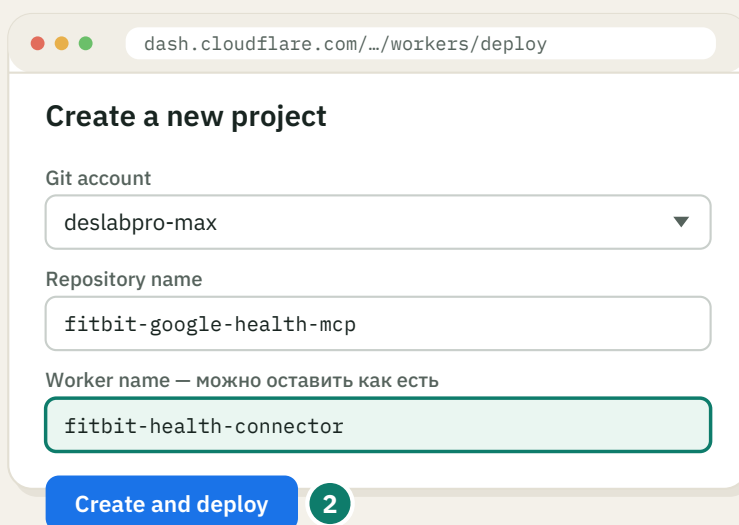

## Проверьте, что сервер жив

Откройте этот адрес в браузере — должна появиться страница «Коннектор Fitbit Air → Claude». Сохраните адрес: он понадобится в шагах 2 и 4. Если на экране настройки задали своё имя воркера — в адресе и в примерах дальше будет оно.

## 2

## ШАГ 2


## Доступ к данным браслета

≈ 15 минут

Создаём ваше **личное** приложение в Google Cloud — только оно и только с вашего согласия сможет читать данные здоровья. Всё делается на `console.cloud.google.com` под аккаунтом, к которому привязан браслет.


## 2.1 Проект и Google Health API

- 1 Выбор проекта (слева сверху) → **New project** → любое имя → Create
- 2 В поиске наберите **Google Health API** → **Enable**

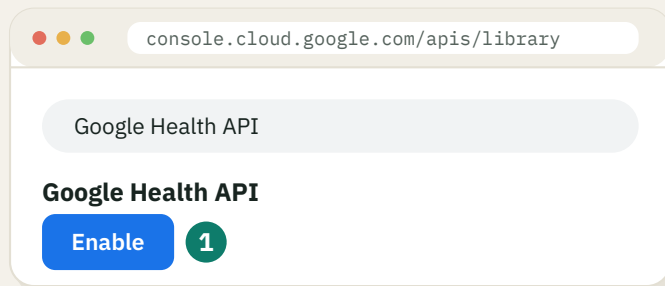



## 2.2 Экран согласия и Test users

- 1 **OAuth consent screen**: имя приложения, ваш e-mail, **External**, режим **Testing**
- 2 **Audience** → **Test users** → **Add users** → добавьте свой адрес Google

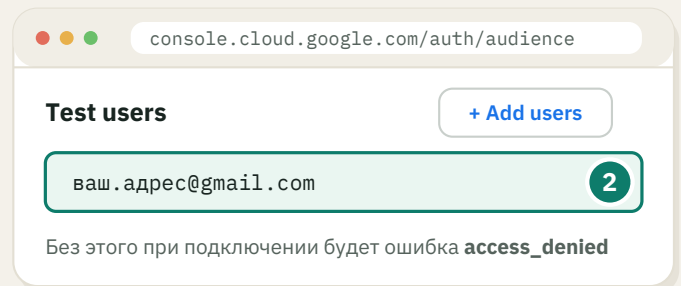

## 2.3 OAuth-клиент для вашего сервера

- 1 Раздел **Clients** → **Create client**
- 2 Тип: **Web application** — не Desktop!
- 3 Имя — любое
- 4 **Authorized redirect URIs** → Add URI → адрес сервера из шага 1 + /callback
- 5 **Create** — появятся Client ID и секрет

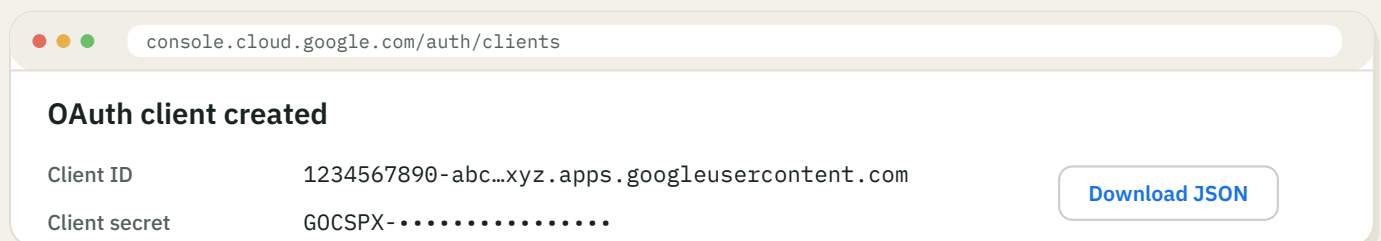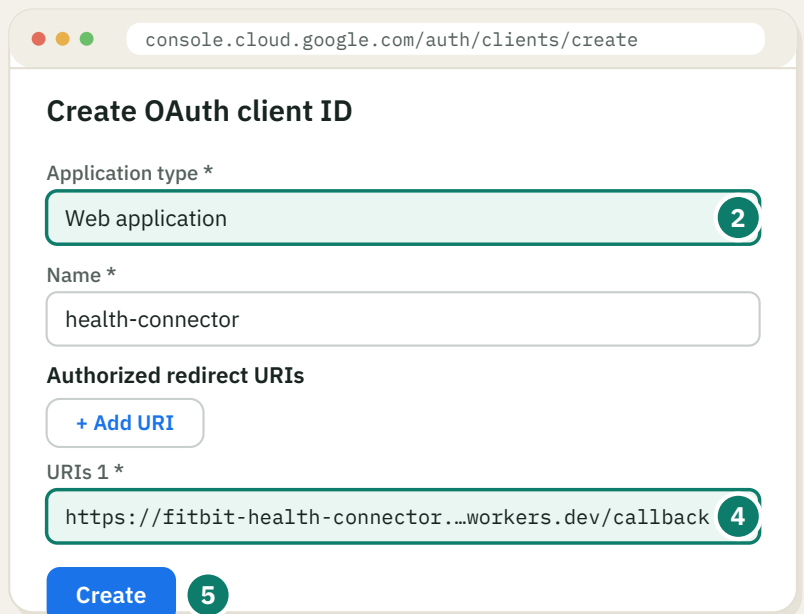**Секрет показывают только один раз**

Сразу скопируйте Client ID и Client secret в заметки или нажмите Download JSON. Потерялся — в клиенте можно добавить новый секрет.


## 3

## ШАГ 3

## Два ключа — серверу

≈ 3 минуты

- 1 Cloudflare → **Workers & Pages** → ваш воркер → **Settings** → **Variables and Secrets** → **Add**
- 2 Type **Secret**, имя `GOOGLE_CLIENT_ID`, значение — Client ID → Save
- 3 Ещё раз: `GOOGLE_CLIENT_SECRET` и секрет `GOCSPX-...` → Save

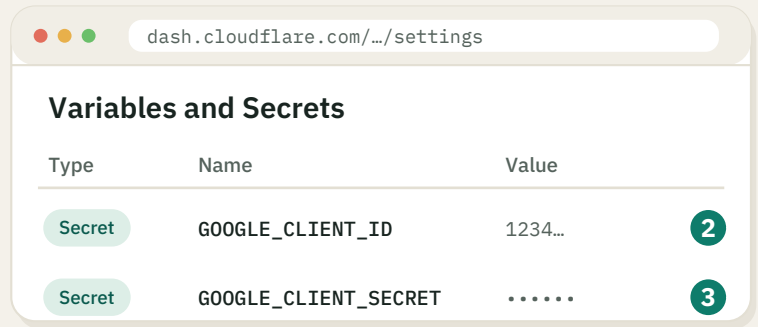

## 4


## ШАГ 4

## Подключаем к ИИ

≈ 5 минут


## Claude — браузер, телефон, десктоп

- 1 claude.ai → **Settings** → **Connectors**
- 2 **Add custom connector** → URL сервера + `/mcp` → Add
- 3 **Connect** → окно Google → аккаунт с браслетом → разрешить

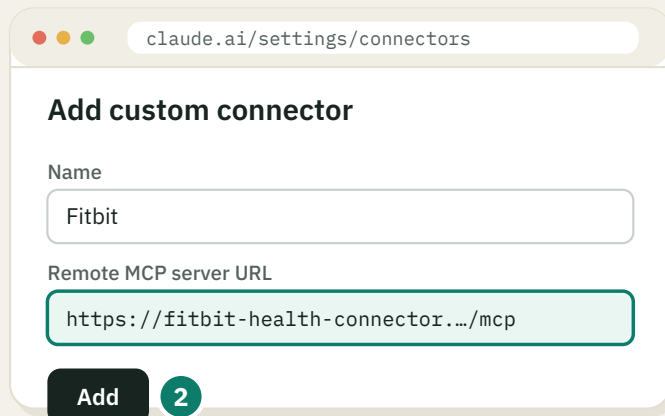

## ChatGPT — планы Plus / Pro

- 1 Settings → **Apps & Connectors** → Advanced → включить **Developer mode**
- 2 **Create** → имя Fitbit, URL сервера + `/mcp`, авторизация **OAuth**
- 3 Окно Google → разрешить. В чате — меню «+»

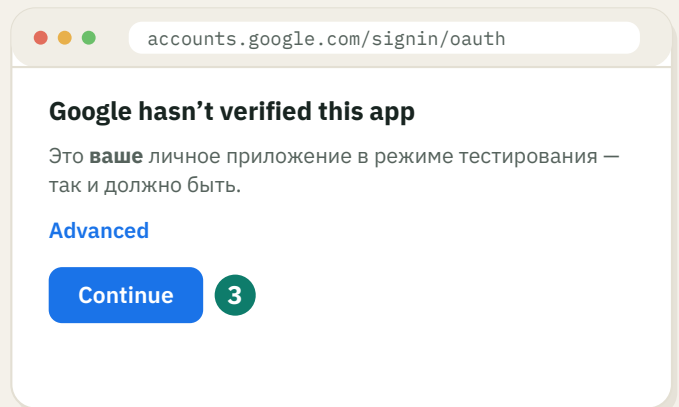

## Готово! Проверьте в любом чате

«Покажи статус браслета» — модель, заряд, время синхронизации. «Сводка за сегодня» — шаги, сон с фазами, пульс, SpO2. «Запиши стакан воды» — проверка записи. Если данных за сегодня нет, откройте приложение Fitbit на телефоне: данные уходят в облако при синхронизации.

## ВОЗМОЖНОСТИ

## 15 инструментов в одном коннекторе

**Сон с фазами**

Глубокий, REM, лёгкий; засыпание, пробуждения, тренды по неделям

**Пuls, HRV, SpO2**

Пульс покоя и по часам, вариабельность, кислород, дыхание и температура кожи во сне

**Активность**

Шаги, дистанция, калории, этажи, зонные минуты, тренировки

**Дневник еды и воды**

Калории и БЖУ голосом — в Fitbit рядом с расходом энергии

**Аритмия**

Уведомления о возможной фибрилляции предсердий (AFib)

**Статус браслета**

Заряд и время последней синхронизации — встроенная диагностика

Данные браслета коннектор только читает. Записывать и удалять можно лишь собственные записи: вес, еду, воду, тренировки, настройение, симптомы.

## ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

**access\_denied в окне Google**

Аккаунт не добавлен в Test users (шаг 2.2). Добавьте и подключитесь заново.

**redirect\_uri\_mismatch**

Адрес в клиенте Google не совпадает с адресом сервера + /callback. Сверьте до буквы, без слэша на конце.

**«Google hasn't verified this app»**

Норма: приложение ваше личное. Нажимайте Continue.

**Ошибка 403 SERVICE\_DISABLED**

Не включён Google Health API (шаг 2.1).

**Просит переподключиться раз в неделю**

В режиме Testing Google ограничивает токен ~7 днями. Лечится: OAuth consent screen → Publish app.

**Пульс есть, а шаги пустые**

Сводки нового устройства Google считает с задержкой до нескольких часов — коннектор покажет диагностику.

**Нет данных вообще**

Браслет не синхронизирован: откройте приложение Fitbit. «Статус браслета» покажет время синхронизации.

**В ChatGPT нет кнопки Create**

Не включён Developer mode или план Free.

**ЛЕНЬ ДЕЛАТЬ РУКАМИ?****Пусть всё сделает ИИ-агент**

Промт для Claude Code или Codex — на следующей странице.

[Промт → стр. 7](#)**Код, обновления и помощь**

Всё открыто на GitHub: код, подробная инструкция, раздел Issues для вопросов. Новые версии подтягиваются кнопкой Sync fork в вашей копии — Cloudflare пересоберёт сам.



## ВАРИАНТ БЕЗ РУЧНОЙ РАБОТЫ

## Пусть всё сделает ИИ-агент

Откройте на компьютере **Claude Code** или **OpenAI Codex** и вставьте промт ниже целиком. Агент сам выполнит терминальную часть, а браузерные шаги проведёт с вами по одному клику.

### Агент делает сам

клонировует код, ставит зависимости, разворачивает сервер, создаёт хранилище

### Вы — в браузере

вход в аккаунты, Google Cloud Console, окна согласия: по одному клику

### Секреты — только вы

Client ID и секрет вводите в терминал, в чат они не попадают

#### ПРОМТ — СКОПИРУЙТЕ ЦЕЛИКОМ

Ты — мой помощник по установке. Установи мне личный коннектор «Fitbit / Google Health → Claude и ChatGPT» строго по инструкции из репозитория <https://github.com/deslabpro-max/fitbit-google-health-mcp>. Перед началом прочитай целиком README.md и docs/SETUP.md — это источник истины; если что-то в этом промте с ними расходится, прав репозиторий.

#### ПРАВИЛА

- Всё, что делается в терминале, делай сам: `git`, `Node.js/npm`, `npx wrangler`. Перед каждой командой одной фразой объясняй, что она делает.
- Шаги, которые возможны только в браузере (вход в аккаунты, Cloudflare Dashboard, Google Cloud Console, окна согласия), не выдумывай и не делай вслепую: давай мне точные клики по одному шагу и жди, пока я напишу «готово». Если у тебя есть управление браузером — можешь нажимать сам, но на экранах входа и согласия останавливайся и передавай управление мне.
- Секреты (Client secret, токены, пароли) я в чат НЕ присылаю. Когда нужно их задать, запусти `npx wrangler secret put <ИМЯ>` и попроси меня ввести значение прямо в терминал.
- Ничего не удаляй и не меняй в моих существующих воркерах Cloudflare и проектах Google Cloud, кроме того, что создаёшь для этой установки.
- При ошибке сначала сверься с разделом «Частые проблемы» в docs/SETUP.md.
- После каждого шага коротко пиши: что сделано, что дальше.

#### ПЛАН

1. Проверь, что установлены `git` и `Node.js LTS` (`node -v`, `git --version`). Если нет — подскажи, как поставить под мою ОС, и дождись меня.
2. Склонируй репозиторий в удобную папку и выполни `npm install`.
3. `npx wrangler login` — откроется браузер, я подтверждаю вход в Cloudflare.
4. `npx wrangler kv namespace create OAUTH_KV` — впиши выданный `id` в `wrangler.jsonc` (биндинг `OAUTH_KV`), если `wrangler` не сделал это сам.
5. `npx wrangler deploy`. Запомни адрес воркера (<https://<имя>.<поддомен>.workers.dev>), открой его и убедись, что показывается страница «Коннектор Fitbit Air → Claude».
6. Google Cloud (docs/SETUP.md, часть 2):
  - если установлен и авторизован `gcloud` — создай проект и включи Google Health API командами (`gcloud projects create ...`, `gcloud services enable health.googleapis.com`); не вышло — через консоль по кликам;
  - экран согласия (External, режим Testing), мой адрес в Test users и OAuth-клиент типа «Web application» с Authorized redirect URI <https://<адрес воркера>/callback> — только через консоль: веди меня по шагам. Напомни, что Client secret показывают один раз.
7. `npx wrangler secret put GOOGLE_CLIENT_ID`, затем `npx wrangler secret put GOOGLE_CLIENT_SECRET` — значения ввожу я.
8. Объясни подключение:
  - Claude: Settings → Connectors → Add custom connector → <https://<адрес воркера>/mcp> → Connect → окно Google → разрешить;
  - ChatGPT (Plus/Pro): Settings → Apps & Connectors → Advanced → Developer mode → Create → тот же URL, авторизация OAuth.
9. В конце дай сводку: адрес сервера, что создано (воркер, KV, проект Google, OAuth-клиент), и фразы для проверки в чате: «Покажи статус браслета», «Сводка за сегодня», «Запиши стакан воды».

Копировать текст из PDF неудобно — возьмите промт на GitHub: docs/AGENT\_PROMPT.md (QR-код справа). Если агент ошибся — пусть сверится с разделом «Частые проблемы» на стр. 6.

